

BRUGERMANUAL


DK

 **Quha Zono2**
Enabling | Independent | Life

Quha Zono 2

Brugermanual

Quha Zono 2 mus

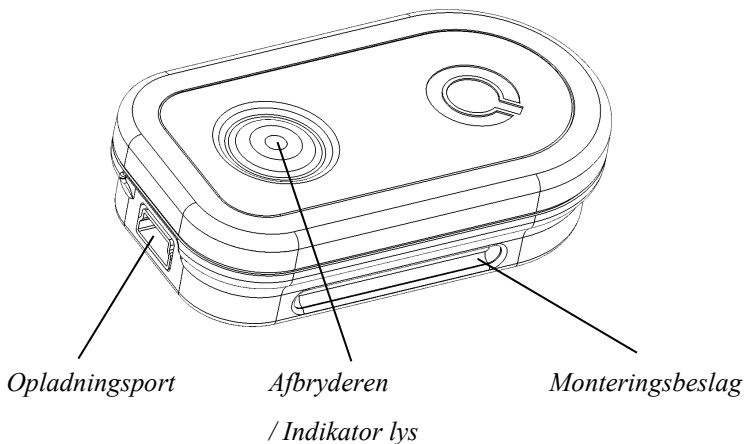

Velkommen til Quha Zono 2-musen.

Denne brugervejledning vil guide dig gennem funktionerne og funktionerne på din enhed.

Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger Quha Zono 2 mus.

Generel

Quha Zono 2 trådløs computermus er beregnet til at blive brugt til computerstyring til forstærkende og alternativ kommunikation (AAC) og/eller til computeradgangsformål som en alternativ museindtastningsenhed til personer, der har udfordringer i deres adgang til en computer pga. skade, handicap eller sygdom.

Quha Zono 2 er en trådløs USB-computermus, som fungerer ved bevægelsesdetektering. Brugeren bærer musen ved hjælp af et monteringsstilbehør, og ved at flytte en kropsdel, såsom hovedet eller benet, kan brugeren flytte musemarkøren. Quha Zono 2 kan bruges i enhver position og med enhver bevægelig del af brugerens krop.


Kom godt i gang og opladning af batteriet

Quha Zono 2 hovedkomponenterne er musen med en bevægelsessensor og USB-modtageren.

Musen har et genopladeligt batteri. Det skal oplades før første brug. For at oplade batteriet skal du tilslutte musen til USB-porten på en computer eller en separate USB-oplader ved hjælp af USB-opladningskablet. Når batteriet er fuldt opladet, vil indikatorlyset på musen blive grønt.

USB-modtager

USB-stik

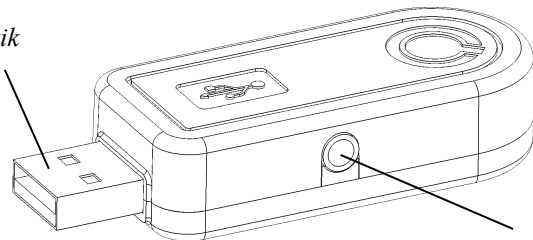

Stik til ekstra kontakter

Installation af USB-modtageren

Quha Zono 2 leveres med en USB-modtager, som er tilsluttet USB-porten på en computer eller en mobilenhed. Modtageren fungerer, når den er tilsluttet en USB-port.

En eller to kontakter kan tilsluttes USB-modtageren. Én kontakt kan tilsluttes direkte til USB-modtageren og vil fungere som venstre museknap. To kontakter kan tilsluttes via en adapter med to knapper. Kontakten, der fungerer som venstre museknap, er forbundet til sølvstikket og højre museknap til guldstikket.

Specielle funktioner kan tildeles switchene med Quha Zono 2 Settings-softwaren (se side 14-15).

Tænde og slukke for musen

Tryk kortvarigt på afbryderknappen for at tænde for musen. Indikatorlyset bliver grønt i et sekund. For at slukke for musen skal du trykke kort på afbryderknappen. Indikatorlyset bliver rødt i et sekund.

Musen tændes automatisk, når den afbrydes fra ladekablet.

Brug af musen


Quha Zono 2-musen bruger en bevægelsessensor til at registrere bevægelse. Når brugeren bærer musen på sit hoved, vil musemarkøren flyttes på skærmen ved at dreje hovedet. Det er intuitivt at flytte markøren og kan bruges på få sekunder.

Musen kan også bruges med enhver del af kroppen, som brugeren er i stand til at bevæge sig. Hovedstyring er indstillet som standardkonfiguration. Med kun et enkelt klik kan Quha Zono 2 opsætningssoftwaren bruges til at vælge andre forprogrammerede bevægelser. Musen kan også indstilles til at genkende brugerspecifikke bevægelser.

Indikatorlys

Strømafbryderens indikatorlys viser enhedens status. Tabellen nedenfor beskriver indikatorlysene.

Farve	Status for indikatorlys	Enhedsstatus
Grøn	På	Dejen er fuldt opladet.
Grøn	Tændt et øjeblik	Der er trykket på strømafbryderen. Enheden vil tænde
Grøn	Blinker. Flashhastighed 1 sek.	Batteriet oplades.
Grøn	Kort blitz, med få sekunders mellemrum.	Enheden er operationel.
Rød	På et sekund	Der er trykket på strømafbryderen. Enheden vil slukke.
Rød	Kort blitz, med få sekunders mellemrum.	Enheden er operationel. Batteriopladningen er lav.
Rød	Blinker hurtigt i et minut.	Enheden har en fejl. Ring for service.
-	Slukket	Enheden er slukket eller i automatisk standbytilstand.

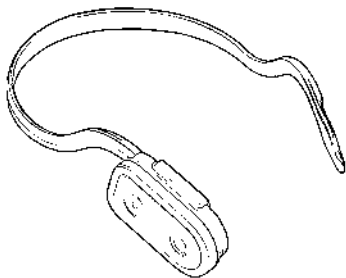

Iført mus og konfiguration

Musen bæres ved hjælp af et tilbehør. Der er tilbehør til at fastgøre Quha Zono 2 til brugerens hoved, fod eller hånd. Standardkonfigurationen for at bære musen er på højre side af brugerens hoved.

En eller to kontakter kan tilsluttes Quha Zono 2-musens opladningsport. For korrekt registrering skal du kun tilslutte kontakter til Quha Zono 2-musen, når den er slukket.

Yderligere information om tilgængeligt tilbehør kan findes på www.quha.com.

Måder at bære Quha Zono 2

Headband



Head Mount Kit



Eyewear Kit



Light Eyeglass Clip



Bevægelser

Quha Zono 2-musen har en indbygget bevægelsesdetektion for at aktivere almindeligt anvendte musefunktioner. Bevægelsesfunktionen kan slås til og fra ved hjælp af Quha Zono-indstillingssoftwaren (se side 14-15).

Pause stopper markøren, indtil brugeren foretager udgangsbevægelsen.

Når rulning er aktiveret, er markøren centreret, og en lille cirkel til indikation vises. I løbet af de følgende 3 sekunder flytter brugeren markøren til vinduet, der skal rulles. Vinduet kan derefter rulles ved at lave op/ned bevægelser. Rulning afsluttes ved at udføre udgangsbevægelsen.

Centrering placerer markøren i det centrale område af skærmen.

Bevægelseshandlingerne aktiveres ved, at brugeren drejer sit hoved eller lem og betjener musen. Alle bevægelserne starter med først at holde musen stationær i cirka et sekund.

Trin	Pause	Rulle	Centrere	Afslutte pause / rulle
1	 s	 s	 s	 1 s
2				
3				
4				
5				

For at sætte musen på pause med hovedet, skal du først holde hovedet stille et sekund. Drej derefter dit hoved til højre, så til venstre, så igen til højre og så til venstre. Markøren er nu sat på pause. For at bruge musen igen, skal du forlade pausetilstanden. Hold først dit hoved stille et sekund. Drej derefter hovedet til højre og derefter til venstre. Markøren bevæger sig nu.

Kompatibilitet

Produktet er kompatibelt med computere og mobile enheder med operativsystemer, der understøtter USB HID-museprotokol: Windows 11 og ældre, macOS, ChromeOS, Android, iOS og iPadOS. Andre operativsystemer kan også være kompatible.

Teknisk information

Mål:	Længde 59 mm / 2,3 tommer, bredde 33 mm / 1,3 tommer, tykkelse 15 mm / 0,59 tommer, vægt 23 g / 0,81 ounce
Driftstemperatur:	+10 °C - +35 °C / +50 °F - +95 °F
Stuetemperatur:	+0 °C - +45 °C / +32 °F - +113 °F
Trådløs forbindelse:	2,45 GHz, rækkevidde op til 10 meter/ 33 ft
Batteri:	LiPo (Lithium Polymer) 240 mAh. Aktiv brugstid er op til 30 timer, i automatisk standbytilstand op til 20 dage.
Pakkens indhold:	Quha Zono 2, USB-modtager, USB- opladning kabel, adapter til at forbinde to kontakter, stereo knap adapter til Zono, Head Mount Kit, Quha Dwell -licenskort, brugermanual og garantikort. Indholdet kan variere fra område til område.

Software installation

Quha Zono 2-opsætningssoftwaren kan downloades fra www.quha.com. Kør venligst Quha Zono 2 opsætningssoftwaren og følg instruktionerne på skærmen.

Når installationen er færdig, vil der være to app-ikoner på computerens skrivebord: Quha Zono 2 Initialisation og Quha Zono 2 Settings. Musens bevægelseskonfigurationer indstilles med Quha Zono 2 Initialisation-appen. Alle andre indstillinger konfigureres med Quha Zono 2 Settings-appen.

Quha Zono 2 opsætningssoftware

Quha Zono 2 kan bruges med standardindstillingerne uden brug af opsætningssoftwaren. Når der kræves ændringer til standardindstillingerne, bruges opsætningssoftwaren. Opsætningssoftwaren kører på Windows-computere. De indstillinger, der er foretaget med opsætningssoftwaren, forbliver i Quha Zono 2-musens interne hukommelse og vil automatisk være aktive, når musen tilsluttes en computer eller mobilenhed.

Opsætningssoftwaren bruges til at ændre musens hastighed, tremorfiltrering, switch-konfigurationer, bevægelser og klikmuligheder.

Musens hastighed kan justeres separat vandret eller lodret.

Tremorfiltrering reducerer den uønskede markørbevægelse forårsaget af rystelser.

Switche kan konfigureres til at fungere som museknapper, markørpause/centrering, dobbeltklik, auto-klik skifte eller rulning.

Bevægelse, dobbeltklik-assistent og auto-klik kan slås til og fra.

Auto-klik-funktionen vil lave et venstre museklik, når markøren er dvælende et øjeblik. Den nødvendige tid og følsomhed kan justeres.

Dobbeltklik-assistenten stopper markøren i en kort periode efter et klik, hvilket gør det nemmere at klikke anden gang uden at flytte markøren mellem klikkene. Dobbeltklik-assistenten vil således ikke foretage dobbeltklikket direkte, men hjælper brugeren med at gøre det nemmere.

Sikkerhed

Enheden indeholder følsomme elektroniske komponenter, og brugeren bør ikke forsøge at åbne eller servicere musen selv. Batteriudskiftning bør foretages af et hvilket som helst servicested, der anbefales af fabrikanten.

Enheden kan ikke bruges, når den er tilsluttet USB-porten til at oplade batteriet.

Denne enhed er kun til indendørs brug. Lad ikke enheden blive våd.

Eventuelle ændringer, der ikke er godkendt af Quha, kan annullere brugerens ret til at betjene enheden.

Hvis enheden bliver varm, eller dens dæksel er revnet, skal du straks stoppe med at bruge enheden og få enheden til service. Rapportér enhver alvorlig hændelse til producenten.

Hvis du føler smerte eller ubehag under brugen af musen, bør du stoppe med at bruge musen i et stykke tid.

Enheden må kun bruges til det tilsigtede formål.

Kontraindikationer

Enheden bør ikke bruges af personer, hvis rygsøjle eller nakke er såret på en sådan måde, at det forhindrer dem i at bevæge hovedet sikkert, eller at bevæge hovedet i længere perioder kan forårsage skade på dem.

Rengøring af musen

Musens overflade kan rengøres ved at tørre dens udvendige plastikoverflader af med et mildt rengøringsmiddel.

Udskiftning af batteri

Når enhedens brugstid er væsentligt forkortet fra dens designlængde, kan du få batteriet udskiftet af et Quha-certificeret servicepunkt

Fejlfinding

Svar på mange spørgsmål vedrørende Quha Zono 2-musen kan findes på siden med ofte stillede spørgsmål (FAQ) på www.quha.com/support/frequently-asked-questions/.

Bortskaffelse af produktet

Når enheden har nået sin levetid, skal den genbruges som elektrisk og elektronisk affald.



Europæisk overholdelse

Producenten af dette produkt overholder, at dette product overholder EU-reglerne for sikkerhed, sundhed, miljø og forbrugerbeskyttelse.



Industry Canada Compliance

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

© 2021 Quha oy. Quha oy er ikke ansvarlig for mulige fejl i denne brugervejledning. Quha oy forbeholder sig retten til at revidere indholdet af denne brugervejledning.

Quha oy
Pirkkalaistie 1
37100 Nokia

info@quha.com
www.quha.com

